



Ordering & Product Information

| | | カタログ番号 | キット | 公称内径 | 公称長さ (cm) | プライミング量 (mL) |
|-----|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|----------------|
| 3Fr | シングルルーメン SV ※1 | 3173118J | MSTタイプ | 20G | 45 | 0.37 |
| | | 3173335J | OTWタイプ | | | |
| | | 1173118J | シャーロック3CGタイプ | | | |
| 4Fr | シングルルーメン ※1 | 3174118J | MSTタイプ | 18G | 55 | 0.67 |
| | | 3174335J | OTWタイプ | | | |
| | | 1174118J | シャーロック3CGタイプ | | | |
| | ダブルルーメン SV ※2 | 3274118J | MSTタイプ | 19G/21G | 55 | 0.51/0.38 |
| | | 3274335J | OTWタイプ | | | |
| | | 1274118J | シャーロック3CGタイプ | | | |
| 5Fr | ダブルルーメン ※2 | 3275118J | MSTタイプ | 18G/18G | 55 | 0.57/0.57 |
| | | 3275335J | OTWタイプ | | | |
| | | 1275118J | シャーロック3CGタイプ | | | |
| | トリプルルーメン ※2 | 3385118QJ | MSTタイプ | 18G/19G/19G | 55 | 0.68/0.44/0.44 |
| | | 3385335QJ | OTWタイプ | | | |
| | | 1385118QJ | シャーロック3CGタイプ | | | |

※シャーロック3CGタイプは、中心静脈カテーテル留置用ナビゲーション装置「シャーロック3CG」(承認番号: 22800BZX00140000) と併用することのできるキットです。

キット構成

| 構成 | MSTタイプ | OTWタイプ | シャーロック3CGタイプ |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| カテーテル | ○ | ○ | ○ |
| スタイレット | ○ | ○ | ○ |
| ガイドワイヤ(50cm, 0.018inch) | ○ | ○ | ○ |
| ガイドワイヤ(135cm, 0.018inch) | | ○ | |
| メス(セーフティ機能付き) | ○ | ○ | ○ |
| イントロデューサ針(穿刺針 21G) | ○ | ○ | ○ |
| イントロデューサ針(シース付きセーフティ穿刺針 20G) | ○ | ○ | ○ |
| イントロデューサ | ○ | ○ | ○ |
| スタットロック(スタットロック・前処置剤) | ○ | ○ | ○ |
| シリンジ | ○ | ○ | ○ |
| エンドキャップ | ○ | ○ | ○ |
| メジャリングテープ | ○ | ○ | ○ |
| シャーロックキット (ECG電極リード・Yセンサカバー・リモコンカバー・固定用ゴムバンド) | | | ○ |



販売名: パワーPICC
承認番号: 22800BZX00139000
クラス分類: [4] 高度管理医療機器
一般的名称: 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット
償還区分: ※1 中心静脈用カテーテル
末梢留置型中心静脈カテーテル
特殊型 シングルルーメン
※2 中心静脈用カテーテル
末梢留置型中心静脈カテーテル
特殊型 マルチルーメン



スタットロック(PICC)

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 | セット内容 |
|----------|-----|------|---------------------------------|
| VPPCSPCE | 大人用 | 50入 | ①スタットロック本体 ②前処置剤 ③滅菌テープ×1 |

※本製品はPICCカテーテルのスーチャーホールをスタットロック本体のリテーナーにはめて使用します。

販売名: スタットロック
届出番号: 27B1X00052000007
一般的名称: カテーテル固定用パッチ
クラス分類: [1] 一般の医療機器

・事前に必ず添付文書及び取扱説明書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者
株式会社メディコン
本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541
crbard.jp



BD, the BD Logo and PowerPICC are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2019 BD. All rights reserved.

2019.10.15.000 MDS_C0002



Power PICC® Power PICC® SV

パワーPICC®

末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット

～PICCによる輸液治療をあらゆる領域へ～



Power.

PICCに造影剤の高圧注入ルートという役割が加わります。

▶ 最大注入速度

— 下記の最大注入速度で造影CT時の造影剤高圧注入が行えます。

| | 最大注入速度 | 造影剤自動注入器 最大注入圧 |
|-----------------|---------|---------------------|
| パワーPICC SV | | |
| 3Fr シングルルーメン SV | 1mL/秒 | 300psi (2068kPa) |
| 4Fr ダブルルーメン SV | 2.5mL/秒 | |
| パワーPICC | | |
| 4Fr シングルルーメン | 5mL/秒 | 300psi (2068kPa) |
| 5Fr ダブルルーメン | | |
| 5Fr トリプルルーメン | | |


▶ リバーステーパー

— 挿入部をやさしく塞ぐとともに、キンクしにくいようスーチャウイング接続部付近がテーパー状にやや太くなっています。



▶ 識別しやすいデザイン

— 高圧注入対応のルーメンを容易に見分けられるよう工夫されています。

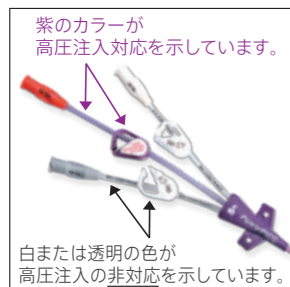

▶ 快適な治療の実現

— 造影剤注入ルート確保のための新たな穿刺が不要です。

High Flow.

高流量のカテーテルはさまざまな治療場面に対応します。

| | | 平均流量 (自然滴下 mL/時) | |
|-----|-------------|---------------------|-----------|
| | | 高圧ルーメン | 非高圧ルーメン |
| 3Fr | シングルルーメン SV | 329 | — |
| 4Fr | シングルルーメン | 1,272 | — |
| | ダブルルーメン SV | 472 | 107 |
| 5Fr | ダブルルーメン | 578 | 578 |
| | トリプルルーメン | 743 | 280 280 |

A Powerful Solution for All Patients!!

PICCによる輸液治療をあらゆる領域へ。
造影剤高圧注入可能型・末梢静脈挿入式中心静脈カテーテル〈パワーPICC〉

One.

パワーPICCは医療従事者の皆様と患者様の幅広いニーズに応えます。

▶ さまざまな使用場面

— 薬液及び栄養剤の投与はもちろん、造影剤高圧注入、CVP測定、採血が行えます。

▶ 挿入方法の選択

— 挿入方法の異なる2つのキット (MSTタイプ、OTWタイプ) から選択できます。

▶ シングルルーメン～トリプルルーメン

— 集中治療領域にも対応できるようルーメン数のバリエーションを揃えています。

▶ 細径サイズ

— 3Frシングルルーメン、4Frダブルルーメンの細径サイズをラインナップし、細い血管にも適したカテーテル選択が可能になりました。

The Power of Purple™

